


盗火者科技微型光谱仪软件下载

1、PC 端软件下载

浏览器打开盗火者科技官网：<https://www.torchbearer.tech>

顶部导航栏找到应用下载：

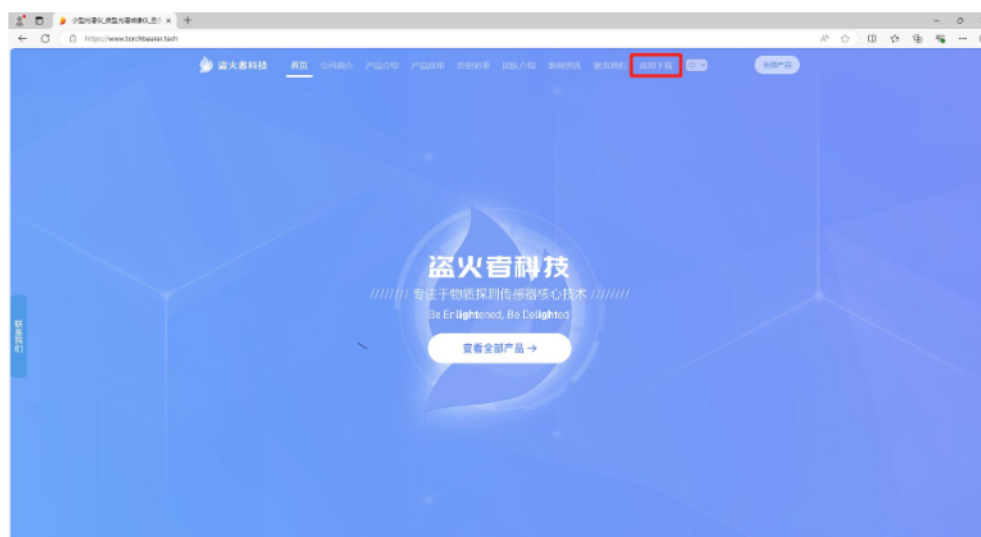

点击 windows 下载：



① 最新客户端下载提供最新版本的客户端软件；




② 此外提供软件说明书、CH340 驱动和 Microsoft Visual C++ 的下载；



③ 按序列号搜索客户端可以根据产品序列号下载历史版本软件和相关文档：

输入框里输入设备型号：（设备型号一般贴在包装盒内侧，例 B42B4K10234CCPD-XXX-XXXX）

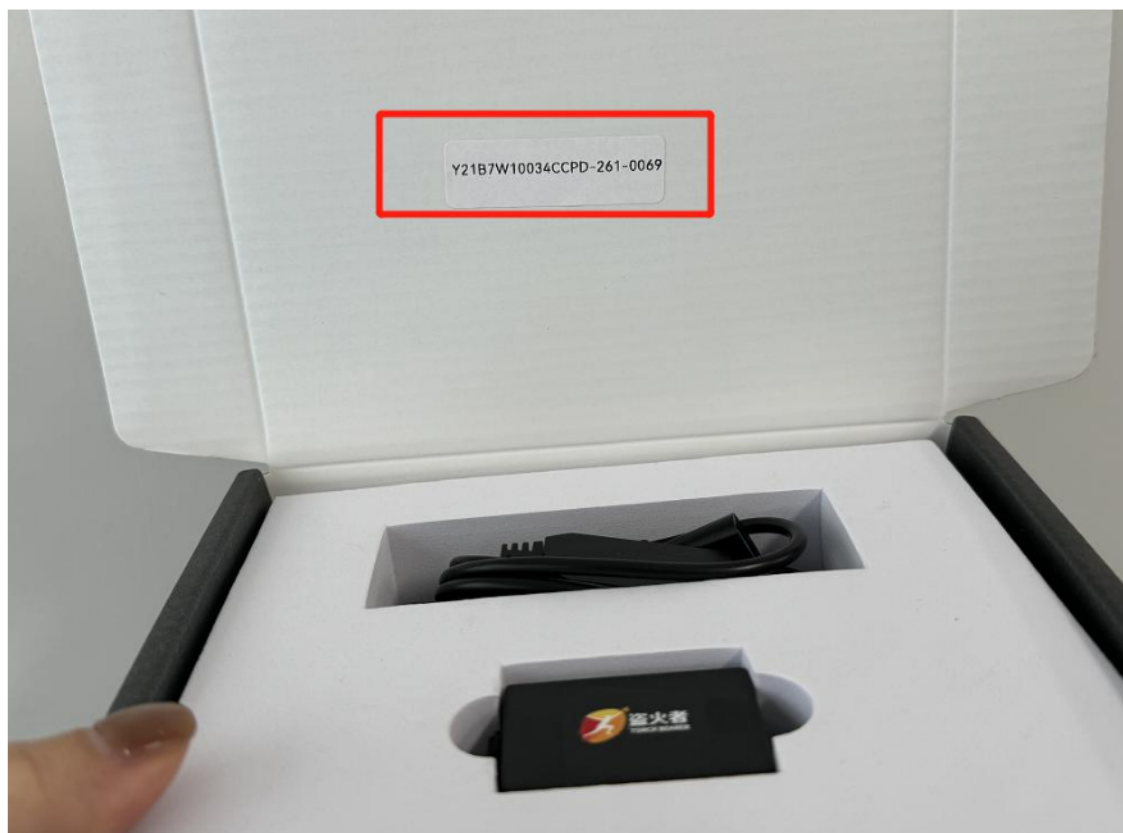

输入产品型号搜索，点击即可下载产品测试软件和相关说明文档：

适配程序和文档下载

识别产品以获得最新的可用更新

P42B4W10234CCPD-101-0000

搜索

想要查找您的产品型号吗？[演示操作](#)

PJG连接方法及命令、数据说明V1.0.1.pdf

接口文档

文件大小: 151.35 KB MD5: 6e6457852b858c29026ffa557949f0 发布日期: 2023-03-16

TLM客户显示版本V1.3.0c.exe

Windows客户端

文件大小: 53.34 MB MD5: 68a7d7460c3bb670728e22c3a8ee3386 发布日期: 2023-03-16

设备串口驱动下载

windows平台驱动

[点击前往官网下载](#)

上位机客户端使用说明.pdf

点击下载使用说明

文件大小: 6.03 MB MD5: e1e8990d8ee45b6bc8a189a7da0b7430 发布日期: 2024-02-19

Microsoft Visual C++


The Visual C++ Redistributable installs Microsoft C and C++ (MSVC) runtime libraries.

[点击官网下载](#)

2、移动客户端下载

① 手机应用商店直接下载：Android 搜索“火眼”app，iOS 搜索“flameeye”进行下载；

② 浏览器下载：打开盗火者科技官网：<https://www.torchbearer.tech>；顶部导航栏找到应用下载：

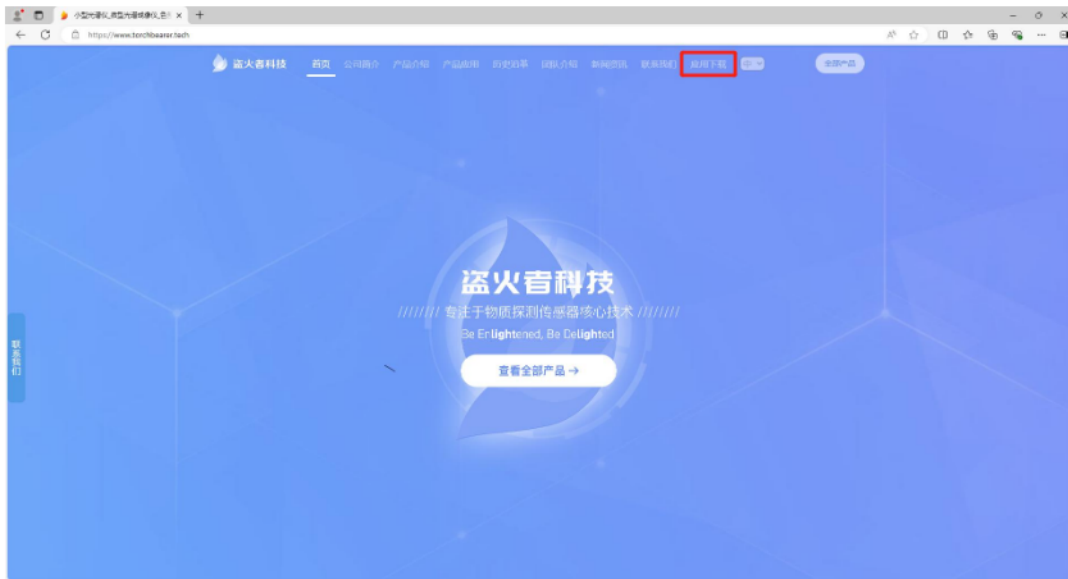

Android 手机可以直接点击下载安装包和说明文档：


[盗火者科技](#)
[首页](#)
[公司简介](#)
[产品介绍](#)
[产品应用](#)
[光学百科](#)
[团队介绍](#)
[新闻资讯](#)
[联系我们](#)
[下载中心](#)
中
[全部产品](#)



火眼

用于连接光谱仪


[安卓下载](#)
[iOS下载](#)
[Windows下载](#)

安卓应用商店
在应用宝下载。



二进制文件
直接下载安卓安装包。

[APK下载](#)
[APK附带使用说明下载](#)

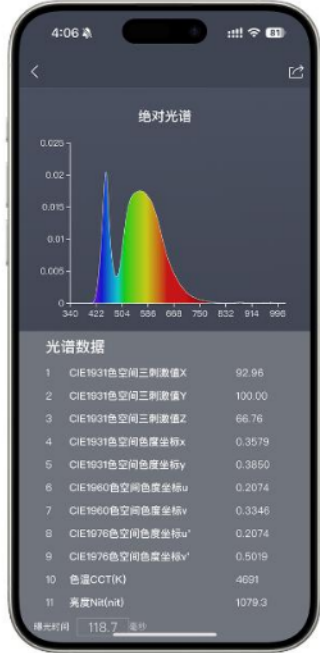

光谱数据	
1	CIE1931色空间三刺激值X 92.96
2	CIE1931色空间三刺激值Y 100.00
3	CIE1931色空间三刺激值Z 66.76
4	CIE1931色空间色度坐标x 0.3579
5	CIE1931色空间色度坐标y 0.3850
6	CIE1960色空间色度坐标u 0.2074
7	CIE1960色空间色度坐标v 0.3346
8	CIE1976色空间色度坐标u* 0.2074
9	CIE1976色空间色度坐标v* 0.5019
10	色温CCT(K) 4691
11	亮度Nit(nit) 1079.3

曝光时间 118.7 毫秒

iOS 手机可以跳转到 AppStore 进行下载：

 盗火者科技

[首页](#) [公司简介](#) [产品介绍](#) [产品应用](#) [光学百科](#) [团队介绍](#) [新闻资讯](#) [联系我们](#) [下载中心](#)

中

[全部产品](#)



火眼

用于连接光谱仪

[安卓下载](#) [iOS下载](#) [Windows下载](#)


苹果应用商店

在App Store下载。

 Download on the App Store

4:06

绝对光谱

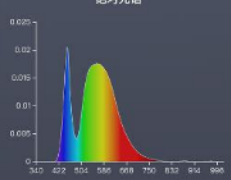

光谱数据

1	CIE1931色空间三刺激值X	92.56
2	CIE1931色空间三刺激值Y	100.00
3	CIE1931色空间三刺激值Z	66.76
4	CIE1931色空间色度坐标x	0.3579
5	CIE1931色空间色度坐标y	0.3850
6	CIE1960色空间色度坐标u	0.2074
7	CIE1960色空间色度坐标v	0.3343
8	CIE1978色空间色度坐标u'	0.2074
9	CIE1978色空间色度坐标v'	0.6019
10	色温CCT(K)	4891
11	亮度ln(nD)	1079.3

曝光时间 118.7 毫秒


Torchbearer Micro Spectrometer Software

Download Instructions


1. PC software download

Open the official website of Torchbearer Technology in your browser: <https://www.torchbearer.tech>


Find the download in the top navigation bar:

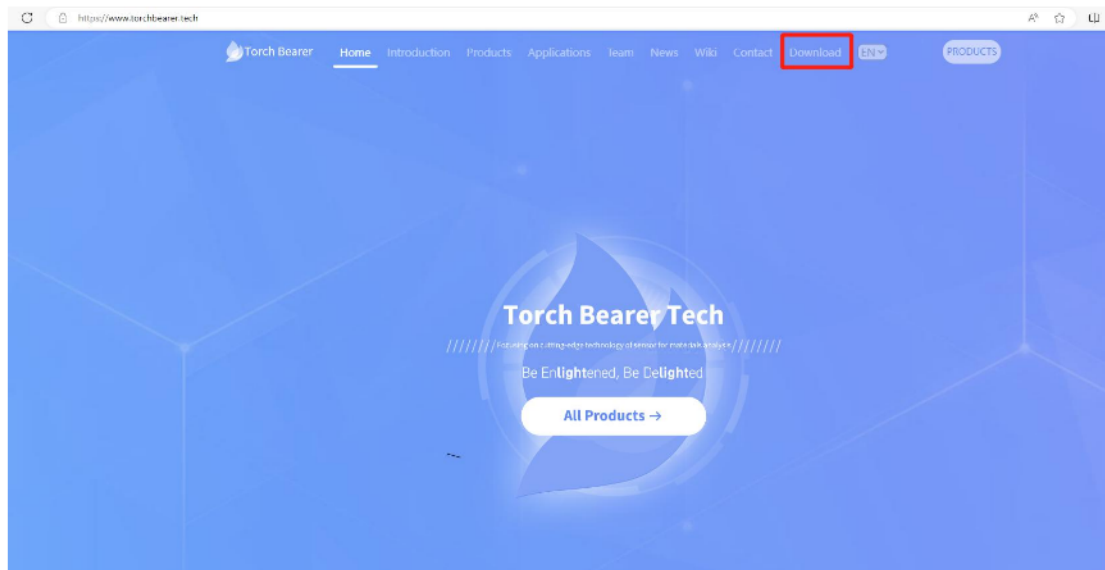


Click Windows Download:

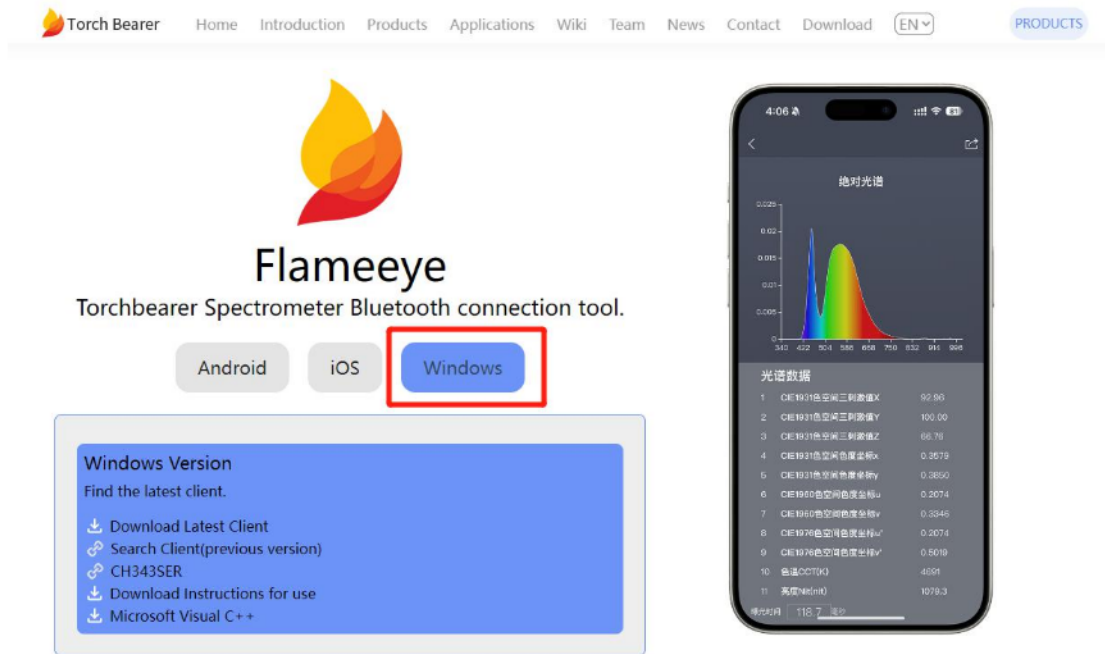


① The latest client download provides the latest version of the client software;

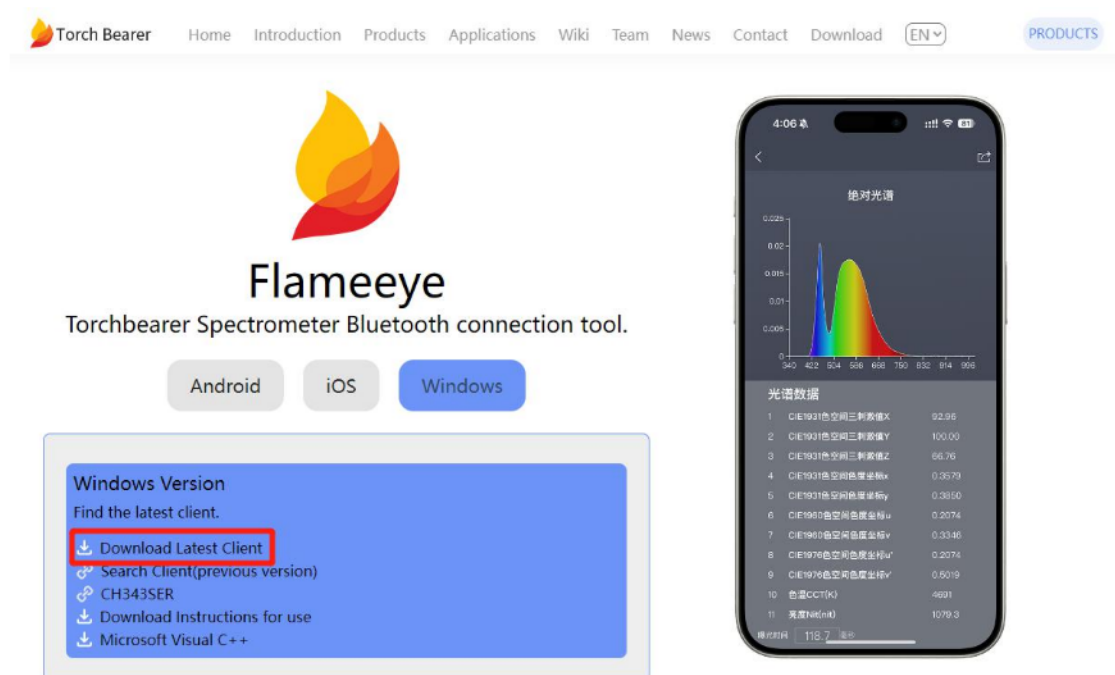


② In addition, software manuals, CH340 drivers, and Microsoft Visual C++ downloads are provided;

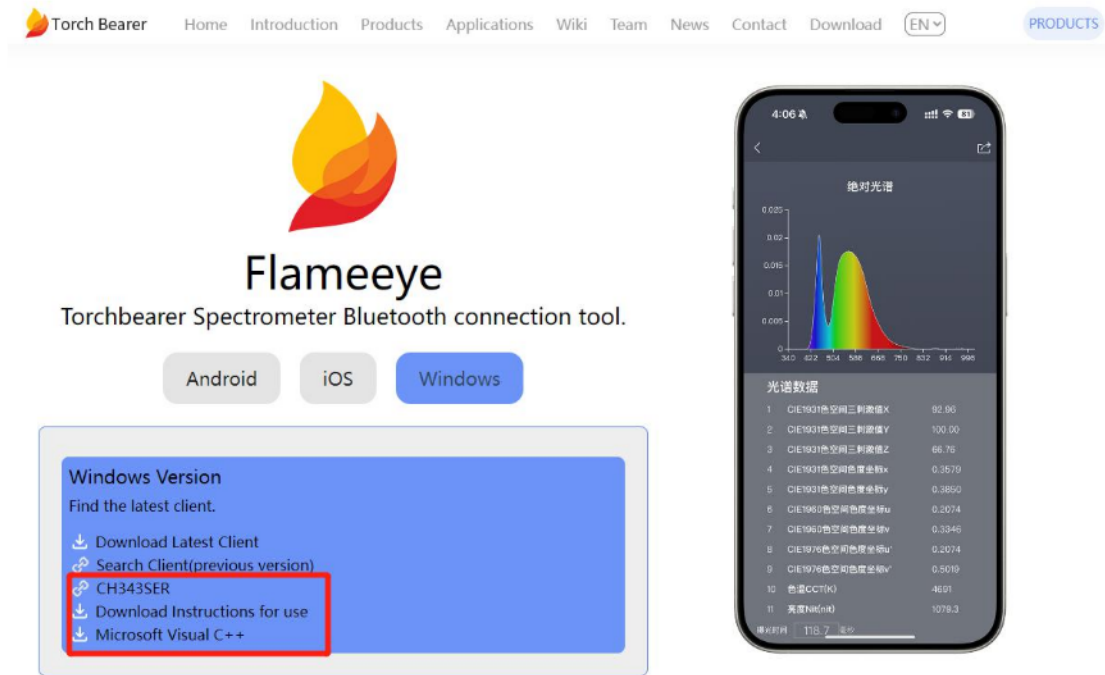

③ Search Client(previous version) can download historical versions of software and related documents based on the product serial number:

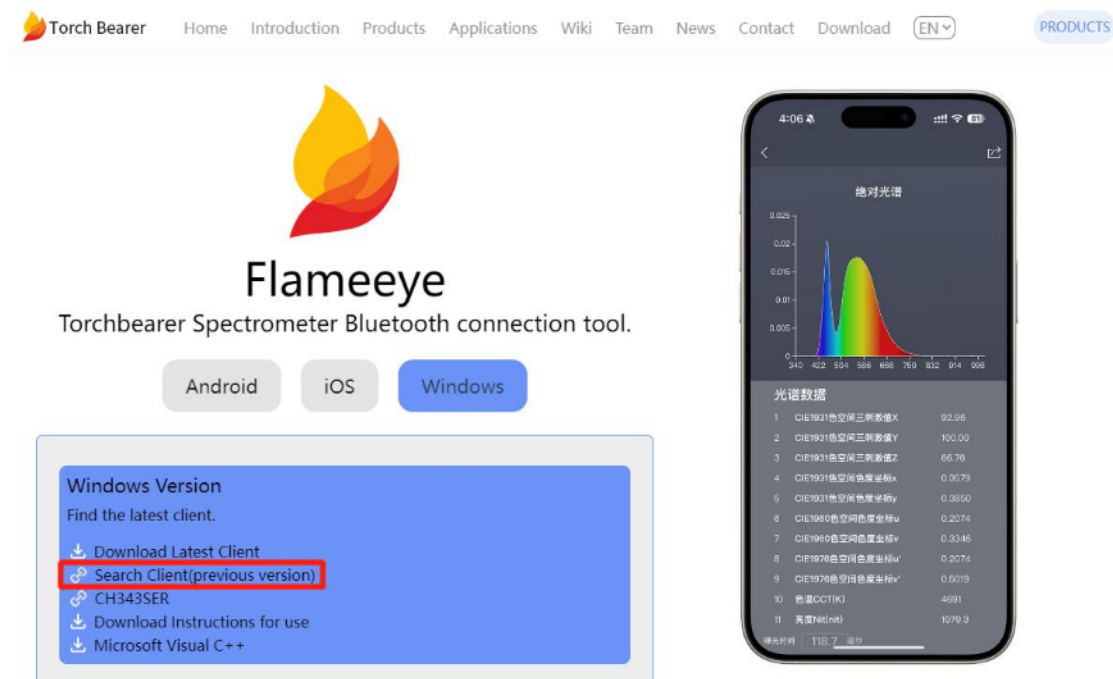

Enter the device **number** in the input box: (The device **number** is usually affixed to the inside of the packaging box, for example B42B4K10234CCPD-XXX-XXXX)

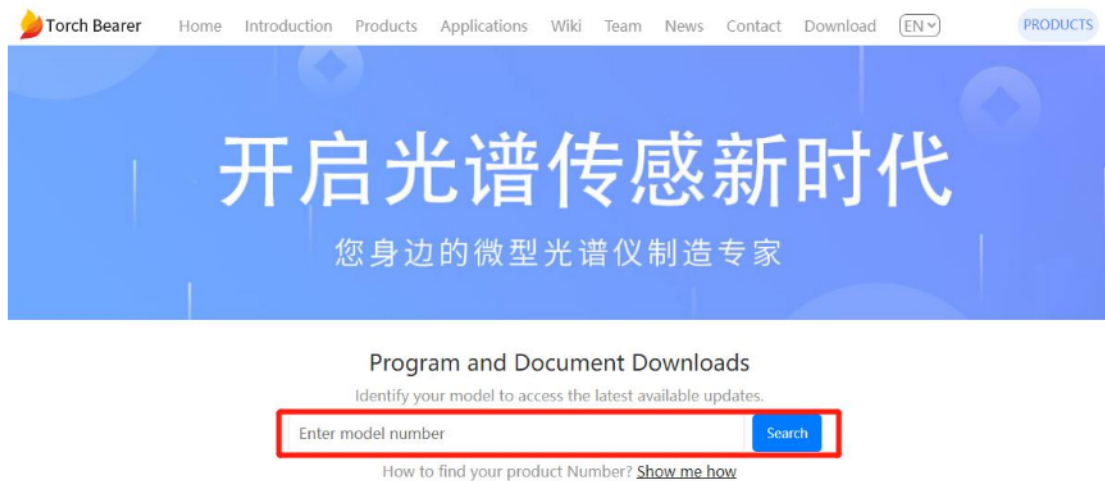

Torch Bearer Home Introduction Products Applications Wiki Team News Contact Download EN PRODUCTS

开启光谱传感新时代


您身边的微型光谱仪制造专家

Program and Document Downloads

Identify your model to access the latest available updates.

Enter model number

How to find your product Number? [Show me how](#)

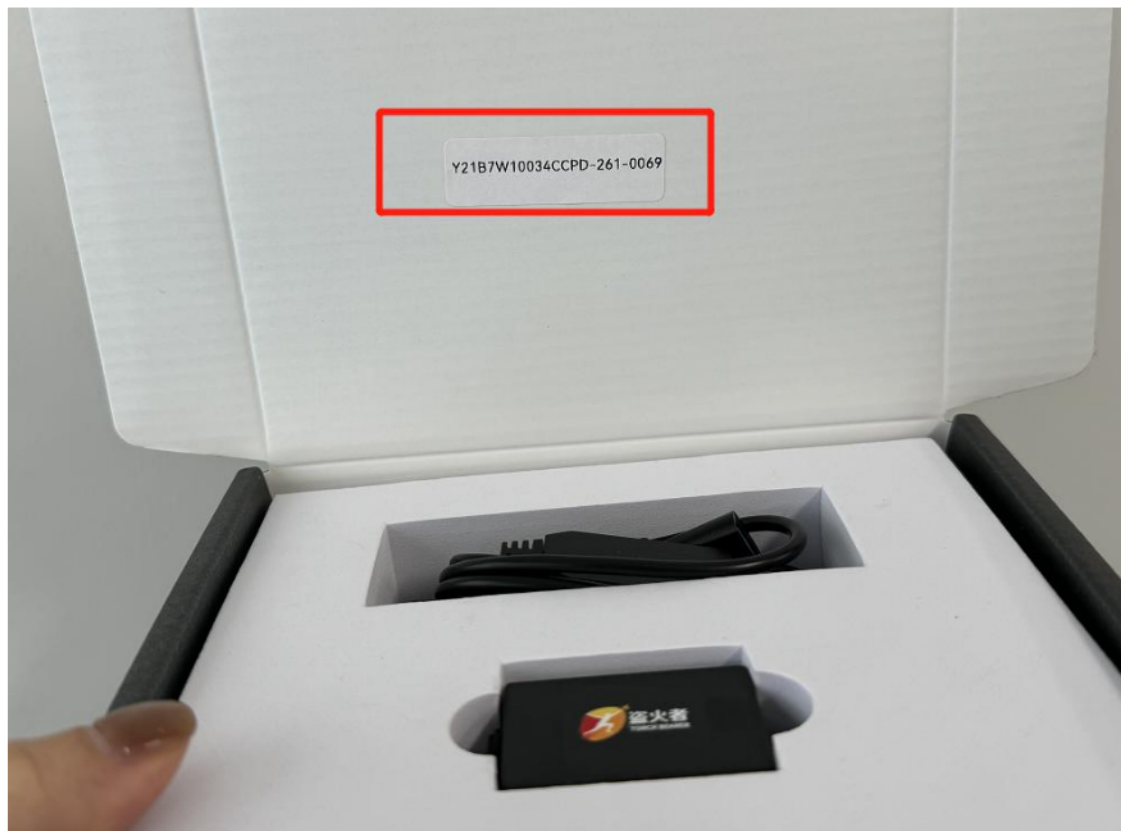

Enter the device **number** to search, click to download product testing software and related documentation:

Program and Document Downloads

Identify your model to access the latest available updates.

Y21B7W10034CCPD-261-0000

Search

How to find your product Number? [Show me how](#)

TLM_Spectrometer_Client_Version_1.4.5c.exe

Windows客户端

Size: 66.16 MB MD5: 2a6f241203cd85ca11125c0d7b7af61e Date: 2024-09-12

设备串口驱动下载

windows平台驱动

点击前往官网下载

上位机客户端使用说明.pdf

点击下载使用说明

Size: 6.03 MB MD5: e1e8990d8ee45b6bc8a189a7da0b7430 Date: 2024-02-19

Microsoft Visual C++


The Visual C++ Redistributable installs Microsoft C and C++ (MSVC) runtime libraries.

点击官网下载


2. Mobile client download

① Download directly from the mobile app store: search for "flameeye" to download;


② Browser download: Open the official website of Torchbearer Technology :<https://www.torchbearer.tech>; Find the app download in the top navigation bar:

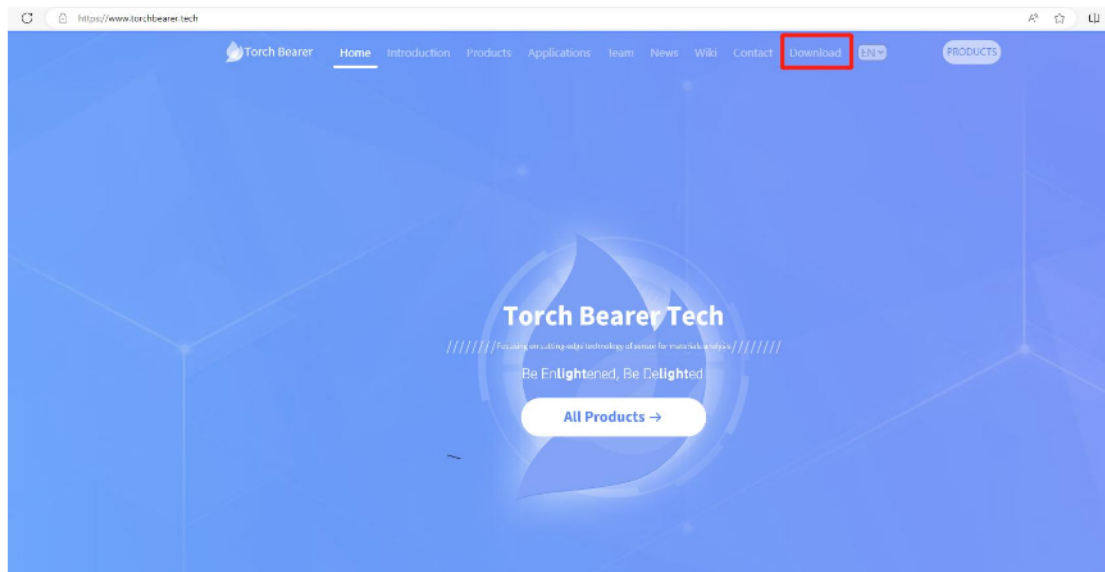

Android phones can directly click to download the installation package and instruction document:

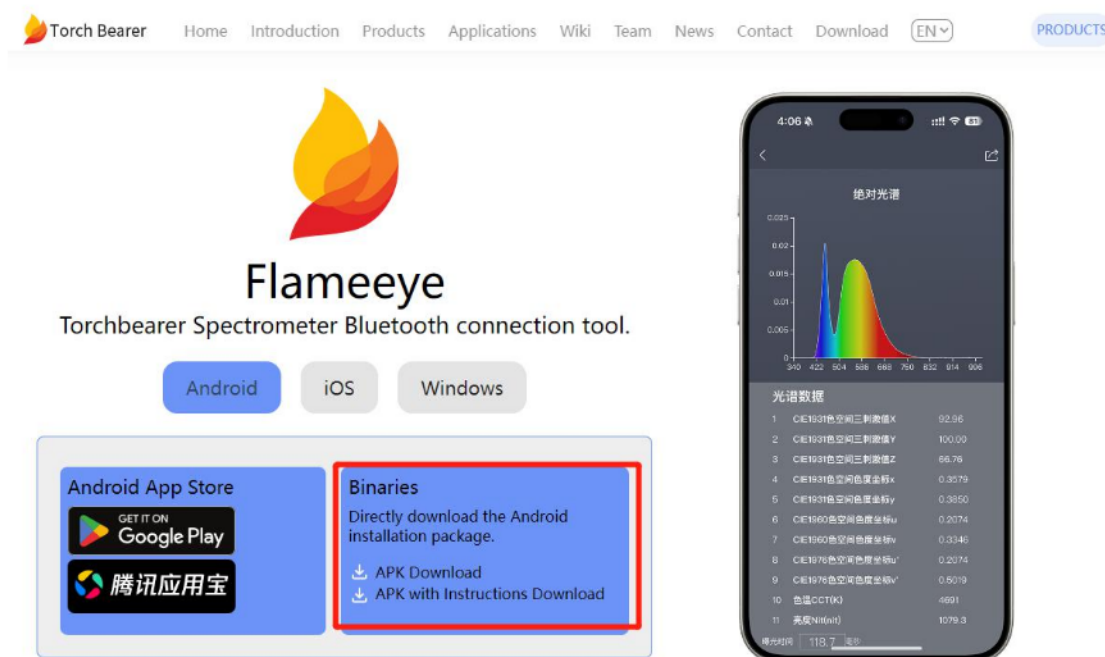

Or click on the Android app store on the left to jump to the Google Store to download

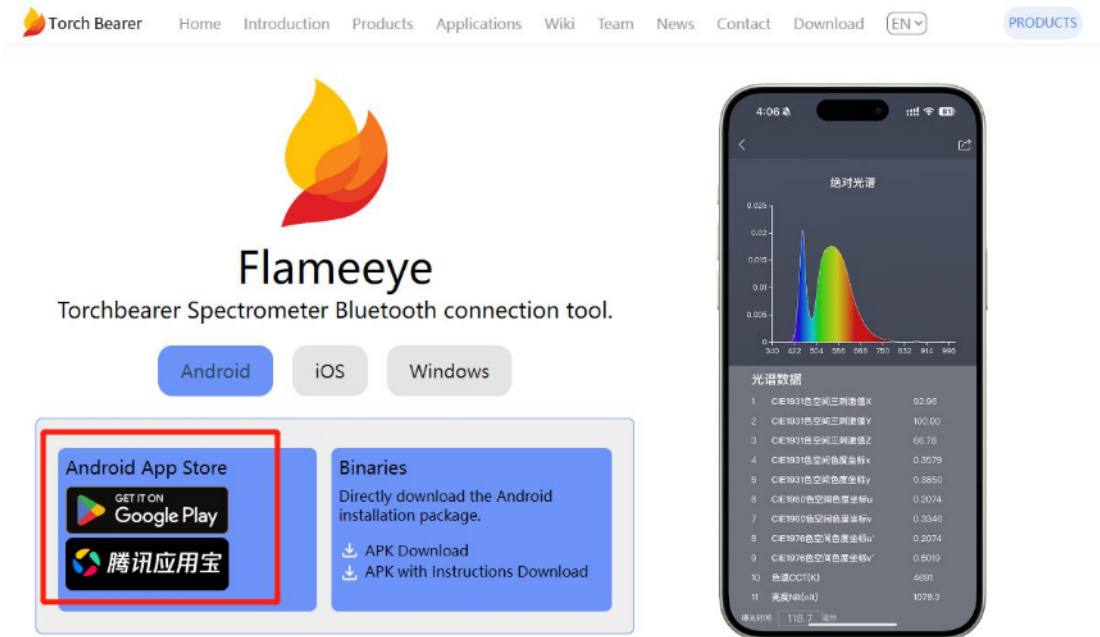

iOS users can jump to the App Store to download:

